

JMA ORCA 関連ソフトウェアについて

■ JMA ORCA 関連ソフトウェア


各ソフトウェアの詳細・操作方法に関しましては、以下のページをご参照ください。



JMA ORCA プロジェクト 公式サイト
<http://www.orca.med.or.jp/>

Linuxmania 活用ガイド
「Linuxmania オルカモデルの使いかた」
http://www.linuxmania.jp/orca_01.html

○日レセ（日医標準レセプトソフト） ※ glclient は医標準レセプトソフトのクライアントです

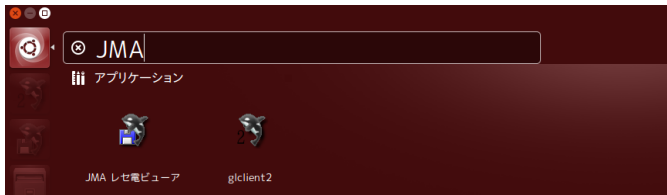

ユーザ：ormastar
Password：ormastar123
詳細・操作方法に関しましては、
<http://www.orca.med.or.jp/receipt/>
をご参照ください。

○医見書



詳細・操作方法に関しましては、
<http://www.orca.med.or.jp/ikensyo/>
をご参照ください。

※日レセとの連携
ユーザー：doctor
pass：dbpassword

○給管鳥



詳細・操作方法に関しましては、
<http://www.orca.med.or.jp/kyukantyo/>
をご参照ください。

※日レセとの連携
ユーザー：doctor
pass：dbpassword

○特定健診



ユーザ：Admin
Password：Admin

詳細・操作方法に関しましては、
<http://www.orca.med.or.jp/tokutei/>
をご参照ください。

○ Firebird (医見書、給管鳥、特定検診 のデータベースエンジンです)

ユーザ：sysdba
Password：masterkey

firebird のユーザ名およびパスワードを変更すると、以下のファイルの変更も必要になります。

- /usr/local/orca/ikensho25/IkensyoPropertyXML.xml
- /usr/local/orca/NITTOKU/property.xml
- /usr/local/orca/qkan6/property.xml

詳細・操作方法に関しましては、

<http://www.orca.med.or.jp/ikensyo/>
<http://www.orca.med.or.jp/tokutei/>
<http://www.orca.med.or.jp/kyukantyo/>

をご参照ください。

セキュリティ上、デフォルトのユーザ名、パスワードのままでお使いいただくのは大変危険です。
いずれもご変更いただくことをお勧めいたします。



■ Linuxmania カスタマイズディスク補足 「ORCA のインストール .sh」 について

「ORCA のインストール .sh」は、適用された状態で出荷されています。

出荷時の状態に戻したい場合には、以下の順に作業を行ってください。

1. 手順書「Ubuntu インストールガイド」に従い、OS を再インストールします。
2. 手順書「Linuxmania カスタマイズディスクについて」に従い、「カスタマイズの実行 .sh」を適用します。
3. 「カスタマイズの実行 .sh」の適用と同様に、「ORCA のインストール .sh」を実行してください。

※ 「追加アプリケーションのインストール .sh」は、ORCA のインストール後、必要があれば実行してください。

OpenDolphin について

オルカモデルには、電子カルテ OpenDolphin がプリインストールされています。
OpenDolphin の設定は特に必要ございません。
本機で使用するための設定が済んでいますので、すぐにご利用できます。

■ ORCA との連携手順

この画面は「W99システム管理情報 - CLAIM接続情報設定 - 医療法人 リナックスエー病院 [ormaster]」のウィンドウです。送信コードは「3 UTF-8」に設定されています。送信アドレスとポートの設定は以下の通りです。

送信コード	送信アドレス	ポート	送信ポート
1	127.0.0.1	5002	5004
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1.CLAIM 接続情報の修正

ORCA のマスタ登録>システム管理マスタで「9000 CLAIM 接続情報」を選択し、以下の通りに設定してください。

CLAIM 接続を 1. する

送信用コード 3.UTF-8

送信アドレス 127.0.0.1

受付ポート 5002

送信ポート 5004

この画面は「(U02X)受付CLAIM送信選択画面 - 医療法人 リナックスエー病院 [ormaster]」のウィンドウです。送信コードは「3 UTF-8」に設定されています。送信アドレスとポートの設定は以下の通りです。

番号	送信アドレス	送信ポート	備考
001	127.0.0.1	5002	

2.CLAIM 送信

ORCA で受付を行い、受付完了ボタンを押すと

受付 CLAIM 送信選択画面が表示されますので [登録] ボタンを押します。

この画面は「OpenDolphin-2.6.0」の患者情報画面です。患者の氏名、性別、生年月日、診療科などの情報が表示されています。

患者ID	診療科	氏名	性別	生年月日	診療科	手続	状態
0001	内科	田中太郎	男	1975-02-25	内科	予約済	予約済

3.OpenDolphin で患者情報を受け取る

上履きのボタンを押すと先ほどの患者情報が表示されます。

※ OpenDolphin 初期ユーザ：admin
pass：admin

この画面は「ドキュメント保存 - OpenDolphin-2.6.0」のダイアログボックスです。送信日と診療科が設定されています。

タイトル: []

診療科: 内科 印刷部数: 0

診療行為を送信する (仮保存の場合は送信しない)

送信日: 2015年12月21日 (月)

保存 仮保存 取消

4.ORCA に診療行為を送信

カルテの記入が終了したらファイル>保存を選択し、診療行為を送信します。